

『ハイパワー型 アシストホイール』全3機種ラインナップ

シートカラー

背折れ 背張りの調整 スイング 脚上げ



NAW-16C-DT-HP-G

背折れ 背張りの調整



NAW-16C-SD-HP-G

背折れ 背張りの調整

NAW-22C-SD-HP-G
少しでもご自分で動かす時がある方に

スロープとの組合わせで有効利用

一般の手動車いす



アシストホイール

アシストホイールとの組み合わせで
高齢者でもスロープ介助ができる！
スロープ長さを短く（約半分に）できる！スロープを…
①省スペースに設置できる
②楽に持ち運び・設置できる
③省スペースで保管できる

オプション

エレベーターユニット



膝関節の可動域に制限がある方に合わせて設定することができます。

アームレスト（高さ調整機能付）




クッションの厚みや座高に合わせて高さを調整することができます。




杖入れ（大）

松葉杖や、杖を2本使用される方のご利用に最適です。

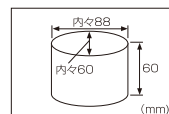

杖入れ（小）

杖を1本使用される方のご利用に最適です。

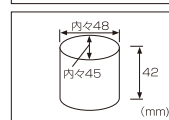

■製品仕様

タイプ	アシストホイール（ハイパワータイプ）		
タイヤサイズ	22インチ	16インチ	
型式	NAW-22C-SD-HP-G	NAW-16C-SD-HP-G	NAW-16C-DT-HP-G
本体寸法（全長×全幅×全高〔mm〕）	1,050×655×870	980×615×870	1,000×590×880
折り畳み時の幅〔mm〕	380	330	330
重量〔kg〕（バッテリー含む）	24	22	24
制御方式/駆動方式	マイコン制御/電動モーター駆動		
実用登坂角度	14°		
作動距離※1	8km		
作動時間※1	2時間		
充電時間	2時間		
バッテリー	ニッケル水素バッテリー		
装備	背折れ 背張りの調整	背折れ 背張りの調整	背折れ 背張りの調整 スイング 脚上げ
希望小売価格（非課税）※2	317,000円	317,000円	357,000円
TAISコード	00025-000015	00025-000013	00025-000012

※1：条件により変わります。

※2：価格についてはお近くのショップにお問い合わせください。

●希望小売価格には本体、専用充電器、専用バッテリー各1個が含まれます。

●車いすは取扱説明書をよく読んでお使いください。

●仕様は改良等により予告なく変更することがありますのご了承下さい。

●「アシストホイール/ASSISTWHEEL」は当社の登録商標です。No.4220105/4220106

バッテリー・充電器（標準装備）

[ISO 9001 認証取得]
東京・神戸

アシスト ホイールに関するお問合せ・モニターのお申込みは

フリーダイヤル
料 金 無 料

0120-725-294

ナブテスコ 株式会社

住環境カンパニー
福祉事業推進部

ISO9001-ISO14001 認証取得

(東 京) 〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目7番9号
TEL 03-5213-1161 FAX 03-5213-1173(神 戸) 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町35
(サービスセンター) TEL 078-413-2724 FAX 078-413-2725ホームページアドレス <http://welfare.nabtesco.com/>

取扱店



上りも下りもラクラク



スロープでも安心



外出も気楽にたのしく

介護保険の用具レンタル
でご利用いただけます。気兼ねも負担も笑顔にかわる
らくらく介護で出かけましょう。

アシストホイールなら介護の相乗効果が得られます。



アシストホイール® はここが違う！

一般の手動車いす

アシストホイール

上り坂



下り坂（前向き）



下り坂（後向き）



芝生・砂利



介護生活において忘れられがちなのが、介護される方の心の負担です。

介護してくれる人の苦労を思いついてつい遠慮がちになり、して欲しいことがあっても我慢してしまう。

これが続くと行動範囲もどんどん狭くなってしまい、部屋に閉じこもりがちになってしまいます。

外出は自立への第一歩です。アシストホイールなら、車いすによる介護をパワフルにアシストできるため

介護する方の負担を大幅に軽減し、らくらく介護を行うことができます。

介護する方が、毎日気楽にたのしく介護ができるようになると、介護される方も心が軽くなり、

気兼ねなく頼み事ができるようになり、ストレスの少ない毎日を過ごせるようになります。

アシストホイールをご利用いただければ、介護する方介護される方の双方に相乗効果が得られるようになります。

さあ！気兼ねも負担もない介護生活を手に入れましょう。

急な上り・下り坂でもラクラク！

グリップセンサー

当社が独自に開発したセンサー内蔵グリップです。これにより、わずらわしい歩行速度調節のためのダイヤルや後進ボタンの操作は一切ありません。お出かけの際電源スイッチをオンすれば、手動車いすと同じ感覚で操作できます。



モーター

14°の坂でもラクラク上るハイパワーモーター採用。上り坂ではモーターがアシストし、下り坂では自動的にブレーキをかけます。折り畳み時も邪魔にならない薄型タイプを採用しています。

収納が便利！

折り畳み・背折れ機能

普通の手動車いすと同じように、簡単に折り畳めます。背折れ機能を装備していますので、コンパクトになります。



アシストホイール® は いろんな機能が いっぱい！



うっかり電源を切り忘れても安心！

電源スイッチ&残量表示

押しやすい手元位置に電源スイッチと一目でわかる4段階のバッテリー残量表示をつけました。また、うっかり電源を切り忘れたときも自動的に電源オフとなる安心機能もついています。



バッテリー

ワンタッチで差し込み、取り外しができます。ニッケル水素バッテリーを採用していますので、環境にやさしく軽量です。

移乗がラクラク！

アームレストが簡単に跳ね上げ機能

アームレストが簡単に跳ね上げられますので、横からの移乗がしやすくなります。さらに着脱も可能です。



フットレストスイングアウト機能

フットレストがスイングアウトしますので移乗がしやすくなります。さらに着脱も可能です。

アシストホイール® をこんな場面で！



おとしりでも

お年寄りのご夫婦に…

これからますます増えるお年寄り同士の介護。車いすに乗っている方も「重いのに申し訳ない」と遠慮しがちになってしまいます。アシストホイールなら外出の機会も増えて、ますます元気に！



芝生でも

芝生や砂利道などで…

外に散歩に出かけると意外と多いのが芝生や未舗装の道路。普通の手動車いすなら、避けてしまいがちのこんな場所もアシストホイールなら安心・ラクラク！



デイサービスの送迎で…

福祉車両のスロープは意外ときつくて乗り降りが大変。アシストホイールなら、急勾配のスロープでも安心・ラクラク！



急勾配のスロープで…

日本の家はまだまだバリアフリーではありません。スロープを付けたのは良いものの、勾配が急すぎて押すのが大変という方に。アシストホイールなら急勾配のスロープでも安心・ラクラク！